



 *Ultrakoz*
Kozmetik - Medikal



Fark Ayrıntılarında Gizli...



Uzun yılların birikimine dayanan sektörel tecrübesini müşterilerine daha iyi yansıtabilmek amacıyla, 2002 yılının Nisan ayında kurulan LOTUS KOZMETİK; “Fark Ayrıntılarında Gizli” sloganı ile hiçbir ayrıntıyı atlamadan başarının da ayrıntılarda saklı olduğunun bilincinde, güzellik salonları ve estetik merkezlerinin vazgeçilmezleri arasında yerini kısa sürede almıştır.

Cilt bakımı, epilasyon, zayıflama, solaryum, spa&wellness, lazer sistemleri, profesyonel cilt ve vücut bakım ürünleri, ağda, parafin ve el&ayak bakım ürünleri kısacası estetik merkezleri ve güzellik salonlarının ihtiyacı olan tüm cihaz, ürün, demirbaş ve sarf malzemelerinin satışını gerçekleştiren firmamız bununla yetinmeyip, müşterilerine satış sonrası hizmetin en mükemmeli de kusursuzca vermektedir.

Müşterilerine “Yerinde ve Doğru Hizmet” vermeyi benimseyen LOTUS KOZMETİK: geçen dokuz yılda sektöründe büyüme adına büyük adımlar atmış ve cihazların ithalatını gerçekleştirmeye başlamıştır. Müşterilerinden aldığı destekle de tüm yeniliklerin takipçisi olmaya devam edecektir.

Serdar ATASOY



Önsöz

www.lotuskozmetik.com



1

Epilasyon Cihazları





**TÜRKÇE
MENÜ**

**CİLT TİPLERİNE GÖRE
OTOMATİK
PROGRAM**

US-10

High Technology IPL Epilasyon



Epilasyon

Cilt Gençleştirme

Kılcal Damar

Leke Tedavisi

Göğüs Bakımı

Özellikler

Işık kaynağı : Intense Pulse Light

Spektrum aralığı : 480-530-590
640-690 --- 1200 nm

Enerji yoğunluğu : 0 - 50 j/cm2

Atış sıklığı : 1 - 6 atış

Atış aralığı : 0.5 - 10 ms

Atış genişliği : 1 - 50 ms

Tekrar frekansı : 1-4 Hz

Dağıtım : Safir Başlık

Işık spotu : 15x40 mm - 15x50 mm

Görüntü sistemi :

8.4 inch dokunmatik ekran

Soğutma sistemi :

Su, hava ve yarı iletken soğutma

Soğutma sıcaklığı : -4C - 0C

Lamba atış sayısı : 80.000 x 2

Çıkış gücü : 2.000 Watt

Güç kaynağı : 220V - 50 Hz

Onay belgesi : CE

Garanti süresi : 2 yıl

Boyutlar : 63 x 50 x 130 cm



Önce

Sonra



Önce

Sonra



**TÜRKÇE
MENÜ**

CİLT TİPLERİNE GÖRE
**OTOMATİK
PROGRAM**

Özellikler

Işık kaynağı : Intense Pulse Light
Spektrum aralığı : 480-530-590
640-690 --- 1200 nm
Enerji yoğunluğu : 0 - 50 j/cm²
Atış sıklığı : 1 - 6 atış
Atış aralığı : 1 - 25 ms
Atış genişliği : 1 - 100 ms
Tekrar frekansı 1-4 Hz
Dağıtım : Safir Başlık
Işık spotu : 15x50 mm
Görüntü sistemi :
7.4 inch dokunmatik ekran
Soğutma sistemi :
Su, hava ve yarı iletken soğutma
Soğutma sıcaklığı : -4C - 0C
Lamba atış sayısı : 80.000
Çıkış gücü : 1.200 Watt
Güç kaynağı : 220V - 50 Hz
Onay belgesi : CE
Garanti süresi : 2 yıl

Boyutlar : 47 x 46 x 113 cm

US-606


High Technology IPL Epilasyon

Epilasyon
Cilt Gençleştirme
Kılcal Damar
Leke Tedavisi
Göğüs Bakımı



Önce

Sonra

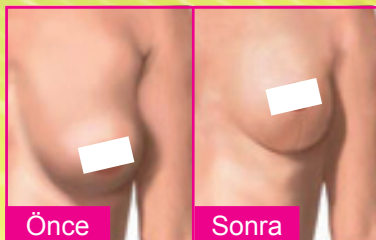

Önce

Sonra

EPİLASYON CİHAZLARI

İstenmeyen tüylerin kalıcı olarak yok edilmesini sağlayan cihazdır. Bir iğne yardımı ile çalışan cihaz, kıl köklerine uygulanan yüksek frekans akımları ile tüylerin yok olmasını sağlar. Bu tür sorunların tedavisinde mükemmel sonuçlar verir.



LTS EpiGold Flash

thermoliz, flash(acısız)
blend sistem epilasyon

- Dijital zaman ayarı
- Dokunmatik ekran
- Vuruş sürelerini ve gücünü ayarlayabilme imkanı
- Manuel ve otomatik pedal kullanım seçeneği
- Termoliz seçeneklerinde blend çıkışını otomatik olarak ayarlama
- Sesli uyarı sistemi

LTS EpiGold Classic Blend

thermoliz sistem epilasyon

- Dijital zaman ayarı
- Vuruş sürelerini ve gücünü ayarlayabilme imkanı
- Manuel ve otomatik pedal kullanım seçeneği
- Termoliz seçeneklerinde blend çıkışını otomatik olarak ayarlama
- Sesli uyarı sistemi

Aksesuarlar

İğne Probu, Ayak Pedalı, Notr Kablosu, 220 V Kablosu

Boyutlar:

25 x 34 x 13 cm



2

Cilt Bakım Cihazları



*Cildiniz
Nefes Alsın...*

IM 9398

Profesyonel Cilt Bakım Seti



- Vapozon
- Frimatör
- İyontoforez
- Yüksek frekans
- Vakum
- Sprey
- Ultrasound
- Remove spot
- Işıklı büyüteç
- Woodlamp

Ultrasound



Remove Spot



Frimatör Takımı



Vakum Sprey



HF - Prob Takımı



ION



Woodlamp





9000 A

Profesyonel Cilt Bakım Seti

- Vapozon
- Frimatör
- İyontoforez
- Yüksek frekans
- Vakum
- Sprey
- Işıklı büyüteç
- Woodlamp



8000 E

Cilt Bakım Seti

- Vapozon
- Frimatör
- Yüksek frekans
- Vakum
- Sprey
- Işıklı büyüteç (opsiyonel)



MT 1203

Mini Cilt Bakım Seti

- Frimatör
- İyontoforez
- Yüksek frekans
- Vakum
- Sprey
- Vakum masajı



Face Beauty Clinic Compact

Cilt Bakım Seti

- Vapozon
- Frimatör
- İyontoforez
- Yüksek frekans
- Vakum
- Sprey
- Lifting
- Vakum masajı
- Cilt testi
- İnfrared (sıcak bakım)



VAP 001

Vapozon

- Buhar + Ozon
- 360 derece dönebilen buhar çıkışı
- 90 derece ayarlanabilir buhar kolu
 - 1 lt. kapasiteli su haznesi
 - Aromaterapi uygulama sistemi
- Su seviyesi bitiminde otomatik kapanma



HF 092

Masaüstü Vapozon

- Buhar + Ozon
- Ayarlanabilir buhar kolu
- Ev, ofis ve erkek berberleri için





IM 9988


Ultrasonic Peeling



- Ultrasonic Masaj • Kırışıklık Tedavisi • Deri Soyma (Peeling) • Melaninleri Yok Etme
- Çalışma Süresi Ayarı • Program Seçimi • Çıkış Gücü Ayarı • Opsiyonel Stand

IM 9988 Ultrasonic peeling cihazı, güzellik uzmanları arasında çoklu aletler içinde en popüler olanıdır. Yüz bakımında göze çarpan etkileri olduğu uzun süreli kullanım periyotları neticesinde kanıtlanmıştır. Saniyede 28.000 elektrik titreşimini, saniyede 28.000 mekanik titreşime dönüştürür. İçe yönelik ultrasonik etki, cilt masajı ve cilt temizleme sağlar. Aynı anda derin hücrelerde uyandırılır. Etkili bir biçimde lekeleri, sivilceleri, sert tabakaları ve gözeneklerdeki artıkları yok eder. Bu sayede cildiniz beyaz, arınmış ve esnek görünür.

3203-B Dermaabrazyon

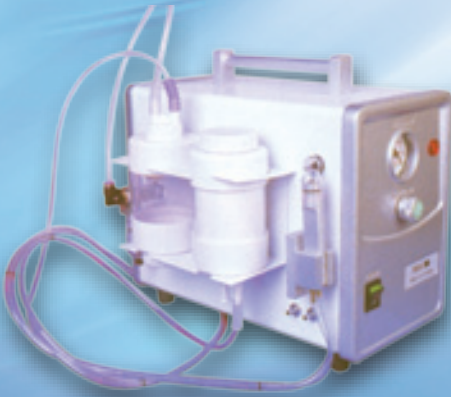

Mikro Kristal Peeling Cihazı

Ciltteki ölü derinin kristaller sayesinde atılmasını sağlar. Derin peeling etkisi yaparak cilt yüzeyinde oluşturulan aşınma sayesinde cildi yeniler.

OXY BLASTER


Oksijen Terapi Cihazı

Oxy Blaster oksijen terapi sistemi ile genç, pürüzsüz, tazelenmiş ve kırışıklıklardan arınmış bir cilde sahip olabilirsiniz.

Cildin epidermis tabakasının derinlerindeki hücre katmanları işlevlerini yerine getirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Enerji; besinlerin oksijen yardımıyla parçalanması sonucunda ortaya çıkar. Kan yoluyla yeterli oksijen alamayan dokuda kırışıklık lekelenme, esneklik kaybı, sarkma ve kuruluk gibi sorunlar ortaya çıkar.

Oksijen terapisi ile dokuların ihtiyaç duyduğu enerji %95 saflıkta oksijenin deriye basınçla püskürtülmesi ile sağlanır. Oksijen epidermis tabakasının altına nüfuz ederek hücrelerin beslenmesini enerji seviyelerinin artmasını ve yenilenmesini sağlayarak kırışıklıkların azalmasını cildin daha genç, parlak ve canlı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Yeterli miktarda oksijen fibroblastların collagen sentezlemesini sağlar. Kolajen yaraların kapanmasında ve kırışıklıkların azalmasında önemli rol oynar. Oksijen terapisi etkisini ilk seanstan itibaren ciltte parlaklık ve canlılık olarak hissettirir.

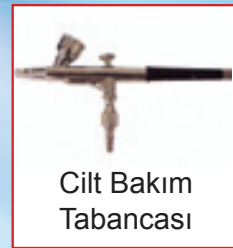

Cilt Bakım
Tabancası

Teknik Özellikler

Akış hızı	: 6 lt / dk
O2 konsantrasyonu	: %98-99
O2 basınç	: 2 bar



US-787 Led Terapi Cihazı

Son teknoloji ürünü olan Led Terapi cihazı 480 adet mavi, 480 adet kırmızı olmak üzere toplamda 960 adet led ile ciltte oluşabilen birçok sorunun giderilmesinde tercih edilmektedir. Kolay kullanımının yanı sıra hiçbir yan etkisinin olmaması tercih sebebidir. Kullanım durumuna göre led başlığı istenilen pozisyonda ayarlanabilir. Her türlü cilt tipi için uygundur.

Kullanım Alanları

- Kırışıklıkların giderilmesi
- Güneş ve yaşlılık lekelerinin yok edilmesi
- Cilt elastikiyetinin artırılması
- Cildin kolajen yapısının desteklenmesi
- Akne tedavisi
- Göğüs toparlama

Teknik Özellikleri

Işık kaynağı	: Led ışık
Dalga boyu	: Kırmızı - 640 nm, Mavi - 470 nm
Işık alanı	: 470 x 300 mm
Çıkış gücü	: 120mw/cm ²
Voltaj	: 220 V - 50 Hz



NBW-F Cilt Analiz Cihazı

Fotoğraf çekimi yapıldıktan sonra cildin (yağ, nem, pigment, elastikiyet, gözenek ve kolajen) yapısını analiz eder. Yapılan analiz sonucunda cihaz cildin ihtiyacı olan ürünlerin önerisini yapar. Müşteri kaydı yapmak için özel program yüklüdür. Veri koruma özelliği vardır. Görüntüyü 10-50-200 kat büyütme özelliğine sahiptir.

Ekran	: 12.1 inch dokunmatik renkli ekran
Önbellek	: 1 Gb
Hard disk	: 160 Gb
Ekran kartı	: Bağımsız
İşlemci	: Çift çekirdek
Yazıcı	: Microprinter



IH 888 A Cilt ve Saç Analizi

Tv ekranında cilt ve saç analizi yapabilen bir cihazdır. İki özel başlığı ile cildi ve saç derisini 50 / 200 kat büyütebilir. Ekranda görüntüyü dondurma özelliğine sahiptir.



TM 38 A Cilt ve Saç Analizi

Bilgisayar bağlantılı cilt ve saç analiz cihazıdır. 50 / 200 kat büyütme, cildi ekranda dondurma özelliği vardır. Aynı zamanda görüntüyü bilgisayar ortamında kaydetme imkanı sunar.





Magic P-111

Kalıcı Makyaj Cihazı

Setin İçindekiler:

Dijital panel, Esnek el probu
Likid boyalar - 4 adet
Kalıcı makyaj iğnesi No:2 - 5 adet
Kalıcı makyaj iğnesi No:3 - 5 adet
Plastik iğne kılıfı (10'luk paket)
Yüzüklü boya karıştırma kabı 10'lu
Deneme deri şablonu, CE belgesi
Aluminyum çanta
Kullanım klavuzu ve DVD



- Güçlü motor
- Yüksek teknoloji
- Son derece sessiz
- Dijital gösterge
- Kolay kullanım
- Şık görünüm

KMC - 01

Kalıcı Makyaj Cihazı

Türkiyede bir ilk!

Artık her uygulama için ayrı ayrı hız ayarı yapmanıza gerek yok.
Yapmanız gereken cihazın üzerindeki kaş, göz ve dudak yazılı tuşlardan birini seçip tuşlamaktır. Bu akıllı dijital kalıcı makyaj cihazı sizin yerinize hız ayarını kendisi ayarlayacaktır.



- Dijital kademeli hız ayarı
- Nikel el kalemi
- 18.000 rpm motor gücü
- Kaş, göz ve dudak için hazır program



Kalıcı Makyaj El Metodu Seti

El Metodu uygulama yöntemini kullanmanın yararları:

1. Tam kontrol
2. Hareket eden parçaları olmaması
3. Mekanik hataların olmaması
4. Mekanik ayarlamalara gerek olmaması
5. Pigmentin pıhtılaşmaması
6. Minimum sıçrama
7. Pahalı otoklav gerektirmemesi (alet % 100 tek kullanımlıktır)
8. Daha az ağrı ve şişme
9. Daha kısa iyileşme süresi
10. Çok az yada minimum rütuş
11. Daha doğal görünüm
12. Maliyeti oldukça uygun



Kalıcı Makyaj El Metodu sistemi bitkisel pigmentlerin manuel şekilde cilde uygulanması olarak tanımlanabilir. Bu yöntem, diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında son derece kontrollü, yumuşak ve güvenlidir. El metod kaleminin ucunda bulunan mikro-iğneler sayesinde renk epiderminin bazal katmanına kadar ulaşır. İşlemin daha yüzeysel ve nazik olmasından ötürü, cildin iyileşme süresi kısalmır. Manuel teknikle tüm kaş modelleri kolayca ve sanatsal bir biçimde çizilebilir. Vücut pigmenti kapsülleyemeyeceği için minimum rütuş ile işlem tamamlanabilir. Sonuç doğal, yumuşak, pudramsı ve zarif görünümdür.



Ekme Kirpik Seti



Set İerięi

- Hipoalerjik yapıştırıcı
- Makyaj temizleyici
- İpek kirpik 9-11 mm - 4 adet
- İpek kirpik 13-15 mm - 3 adet
- Gözaltı bandı
- Çözücü jel
- Sabitleyici maşa
- Kurutucu pompa
- Profesyonel cımbız düz
- Profesyonel cımbız kıvrık
- Alüminyum anta
- Kullanım klavuzu
- DVD

Kirpik Perma Seti



Set İerięi

1. No'lu ilaç : Perma ilacı (3 adet)
 2. No'lu ilaç : Sabitleyici (3 adet)
 3. No'lu ilaç : Besleyici (2 adet)
 4. No'lu ilaç : Sökücü (2 adet)
- Kirpik perma bigudisi (16x2 adet)
Kirpik perma yapıştırıcısı (15 ml)



Protez Tırnak Seti

Protez Tırnak Seti tırnaklarınıza doğal ve sağlıklı görünüm kazandırır. Klasik akrilik kadar güçlü ve esnektir. Bu sistem kokusuzdur, sararmaz ve naturel tırnaklarınıza zarar vermez. Kısa sürede uygulanabilen Akrilik-Dipping tekniği ile kalıcı frenc yapma, kırılmış tırnakları onarmak hiç bu kadar kolay olmamıştır.



Profesyonel Elektrikli Törpü Sistemi

Manikür & Pedikür protez tırnak için törpü cihazı

Elektrikli cihaz, tırnak dizaynı için mükemmel törpü setidir. Cihazın ucu sağ ve sol elle çalışacak teknisyenler için tasarlanmıştır. İleri geri düğmesi mevcuttur. 500'den 25.000 rpm'e yükseltilen hız ayarı ile son derece sessiz ve esnek el cihazı ile tırnaklar için en uygun kullanımı sağlar.





Profesyonel Simli Dövme Seti



Set İçeriği

- 500 adet 3 katmanlı şablon
- 24 renk 20 ml özel vücut simi
- 2 adet FDA onaylı vücut yapıştırıcısı
- 2 adet uygulama fırçası
- 2 adet temizleme fırçası

*Özel Günlerde,
Özel Görünmek İçin ...*

4-7 Gün
Kalıcılık

3 Dakikada
Uygulama

Suya
Dayanıklı



Simli Dövme Seti

Set İçeriği

- 200 adet 3 katmanlı şablon
- 6 renk 20 ml özel vücut simi
- 1 adet FDA onaylı vücut yapıştırıcısı
- 1 adet uygulama fırçası
- 1 adet temizleme fırçası



3

Vücut Bakım Cihazları





Beautydom GS8.1

Kavitasyon Cihazı & Vakum Terapi



Selülit tedavisi ve bölgesel zayıflamada son teknoloji...



Ultrasonla bir sıvı implazyon etkisi üretmek kolaydır. Yani dalga genişlemesi ve sıkıştırması sıvı içinde çok sayıda mikro boşluk oluşturur. Bu boşluk gaz ve buharla doludur. Güçlü ses dalgaları sıkıştırma döngüsünde sıvı moleküller üzerinde pozitif etkiye, genişletme döngüsünde ise vakum etkiye sahiptirler. Sıvı ve biyolojik dokular arasında uyum vardır. Moleküler bağ düşük yoğunlukta yağ hücrelerinde zayıftır ve güçlü ses dalgalarının neden olduğu düşük vakum fizikte "kavitasyon" olarak bilinen organize boşluklar üretebilirler. Hücre içinde ve dışındaki boşlukların neden olduğu implozyon moleküler hareketi başlatır ve yüksek bir enerji düzeyi meydana getirir. Bu işlem sonunda yağ hücrelerinin kırılmasına neden olur.

GS8.1 vakum & ultrason zayıflama makinesi kavitasyon teorisini uygular. Yoğun vibrasyon uygulamak için 40kHz-1MHz ultrason kullanır. Bu yağ dokularında bir iç patlamaya neden olur ve bu nedenle lipositten kurtulur. İnatçı ve derin yağı etkin şekilde kırabilir, liposit miktarını ve boyutunu azaltır. Diatermal ve vakum emişi liposit ve doku sıvısı akışını hızlandırabilir ve lenf sisteminden yağ asidi, atık ve toksinin boşaltılmasına yardımcı olur. Vakum fonksiyonu liposit ve yağ dokularının sıvı akışını kolaylaştıracak, sonra toksinlerin ve atıkların salgılanmasını hızlandıracak, yağ eliminasyonu etkisi, zayıflama, cilt sıkılaştırma ve kas esnekliği artırımı sağlayacaktır.

Sonuçlarına inanamayacaksınız...

Teknik Özellikler

Frekans	: 40 Khz / 80 Khz / 1 Mhz
Çıkış gücü	: 0,5 - 25 W/cm2
Vakum basıncı	: 0.1 Mpa
Başlıklar	: M80 - M50 - 4 X Ultrason Pedleri Vakum Başlığı (1 Mhz Ultrason ile)
Ekran	: Dokunmatik Renkli
Güvenlik	: AC Kart Sistemi
Voltaj	: AC 110V, AC 220V
Maksimum güç	: ≤ 350W



Balance

Dual Body Slimming System



Balance; kavitasyon ve multi polar RF sisteminin birleştiği dünyadaki ilk sistemdir. Kavitasyon işleminin sonuçlarını RF ile birleştirerek incelmeyi çok daha öteye taşıyabilir ve hızlandırabilirsiniz. Vücut şekillendirme ve selülit tedavisinde en iyi kombinasyon cihaz olan Balance, Multipolar RF yüz başlığı ile kırışıklık ve cilt sıkılaştırma da yapabilmektedir.

Kavitasyon yağ hücrelerinin acısız parçalanmasını sağlayarak incelme sağlarken, Multi polar RF fonksiyonu ile lenf drenaj, vücut sıkılaştırma ve cilt gerginleştirme işlemi yapar.

KAVİTASYON

- 2 farklı ölçüde başlık
- Ergonomik tutuşlu dizayn
- Güvenli ve stabil ultrasonik kavitasyon ve yüksek güç
- 3 farklı mod
- Dokunmatik lcd ekran

MULTI RF

- 2 farklı ölçüde başlık
- Topraklama plakası gerektirmez
- Otomatik cilt sensörü (Contact - Non contact)
- Güvenli tedavi
- Stabil RF enerji çıkışı



ÖZELLİKLER

KAVİTASYON

Frekans	: 28Khz, 40Khz +/-2Khz (100W)
Başlık	: 44J (Vücut & Yüz)
	: 80J (Vücut)
Güç ayarı	: 1 ~ 10 Level
Süre	: 10 dakika (Ayarlanabilir)

MULTI RF

Yüz	: 1.0Mhz	Vücut	: 0.5Mhz (150W)
Yüz başlığı	: 6 Polar		
Vücut başlığı	: 4 Polar		
Güç ayarı	: 1 ~ 10 Level		
Süre	: 10 dakika (Ayarlanabilir)		

Ölçüler (mm) : 300x470x1100

Güç : 250W

Ağırlık : 33 kg



A 100

Kavitasyon Cihazı & Ultrasound

Teknik Özellikler

Ultrakavitasyon	: Frekans 40 Khz / 1 Mhz
Enerji yoğunluğu	: 0 ~ 5 cm ²
Çıkış enerjisi	: 100W (40 Khz)/30 W(1Mhz)
Başlık boyutları	: 40 Khz ϕ 50 mm 1 Mhz ϕ 8 mm ϕ 45 mm ϕ 65 mm
Görüntü ekranı	: 7/8.4 inch renkli dokunmatik



L 23 C

Monopolar RF Cihazı

- Cildin kan dolaşımını hızlandırır.
- Metabolizmayı harekete geçirir.
- Toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
- Selülit tedavisinde, sıkılaşmada ve kilo kaybında yoğun etkiye sahiptir.
- Bağı dokusunu kuvvetlendirir.
- Ağrı tedavisinde destekleyici olarak kullanılır.
- Kırışıklıklarda, göz altı torbalarında, akne tedavisinde ve yüzdeki sarkmalarda kullanılır.

Teknik Özellikler

Voltaj	: 220V
Frekans	: 50/60Hz
RF frekans	: 0.3-0.5Mhz
Güç	: 300W



*Pürüzsüz ve
Güzel bir
Vücut için...*



RF - 315

Monopolar RF Cihazı + Soğuk Bakım

Radyo dalgaları vücuttaki su molekülleri ile iyonlarını (sodyum-potasyum-kalsiyum-magnezyum) harekete geçirir. Bunların hareketlenmesine bağlı olarak enerji açığa çıkar ve bölge ısınır.

Amaç; ısıtılan (tedavi edilen bölge) bölgenin ısısını 41-43 dereceye kadar çıkartmaktır (normalde vücut ısısı 36-37 derecedir). Cilt ısısı bu noktaya geldiğinde, cilt altı bölgedeki ısı 50-55 dereceye tekabül eder. Bu ısı vücuda herhangi bir tahribat ya da zarar vermez.

Radyofrekans yöntemi ile bölgesel tedavinin 3 etkisi vardır.

1.Etki: Temel Mekanizma : Radyofrekans su içeren bütün dokuları kontrollü bir şekilde çok derin dokulara geçmesine (veya iletilmesine) yol açmadan ısıtmaktadır. Çünkü Radyofrekans hücrelerdeki su moleküllerini harekete geçirmektedir. Bu teknoloji ile su düzeyi çok yüksek olan yağ hücrelerine ulaşabilmektedir. Yani yağ dokusunu eritebilmektedir.

Tedavi sırasında ısınan bölgede yağ hücrelerinin duvarları parçalanır, yağlar erimeye başlar. Eriyen yağlar dolaşımın artmasına bağlı olarak kan ve lenf yolu ile emilir ve vücuttan atılır.

2.Etki: Yaşlanmış ve yıpranmış kolajen doku parçalanır ve ölür. Bunların yerine vücut yeni kolajen doku üretimine başlar.

3.Etki: Vücutta sıkılığı ve gerginliği sağlayan dokuya bağ dokusu denir. Bu dokuyu oluşturan hücreler ise fibroblast hücrelerdir. Oluşan ısı ile fibroblast aktivasyonu hızlanır.

Yağların erimesi, kolajenlerin çoğalması ve bağ dokusunun yenilenmesi ile inceltme, zayıflama, selülitlerin yok olması, toparlanma, sarkıkların giderilmesi ve kırışıklıkların yok olması sonucu doğar.

Uygulama sonrası soğuk bakım yaparak vücudun rahatlamasını sağlayabilirsiniz.



Teknik Özellikler

Voltaj	: 220V
Frekans	: 50/60Hz
RF frekans	: 0.3-0.5Mhz
Güç	: 350W



Medi Ozon Ozon Sauna

Infrared/Kızılötesi ışın terapi–infrared kombinasyonlu selülit giderimi için tasarlanmış olup, vücut gözeneklerinin maksimum büyüklük de açılarak ozonun vücuttaki yağ tabakasını hızlı bir şekilde yakmasını sağlar.

Ozon sauna yöntemiyle yapılan terapi; Selülit giderme, performanslı zayıflatma ve yağ dokularını parçalamasını sağlar. Kan hücrelerinin elastikiyetinin artırılarak kılcal damarlardan geçişine olanak sağlar. Detoksifikasyona yardımcı olmak için vücudun oksijen miktarını artırır. Detoks özelliği ile vücudumuzdaki kimyasalların vücuttan atılmasını sağlayarak azaltır. Selülit tedavisinde destekleyici olarak uygulandığında doymamış yağ asitlerinin çift bağları ile reaksiyona girerek yağ zincirlerinin kırılmasına neden olur. Kandaki oksijen düzeyini artırarak dokuların daha fazla oksijene ulaşmasını sağlar. Vücudun dış etkenlere karşı direncini artırır. Derinin ölü hücreden arınarak yenilenmesine yardımcı olur. Yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Ozonium Ultrasonic Üniteli Saç Ozonlama Cihazı

- Saç sağlığını etkin biçimde korur.
- Saç ve saç derisindeki bakterileri öldürür
- İstenmeyen kokuları giderir
- Saf ozon ve ince ultrasoniz su serpintisiyle antistress sağlar
- Hasarlı, yıpranmış saçlar ve saç derilerini güçlendirir
- Protein esnekliğinin desteklenmesini %30-40 oranında etkiler
- Saçların parlak ve baskınlığını artırır
- Saç ve saç derisindeki kimyasal artıkları giderir.

Teknik Özellikler

Maksimum ultrasoniz nebülizasyon gücü	: 30W / her bir birim (Üç birim 90W)
Maksimum ısıtma sistemi gücü	: 850W
Maksimum ozon jeneratörü gücü	: 15W
Sprey ısısı	: 55 °C'ye kadar yükseltilebilir
Korona tipi	: ozon jeneratörü
(No, No ₂ içermeyen saf ozon ürünler ≤ 60mg/saat)	
Su nebülizasyon partikülleri	: < 0,003 mm





OD 8108

Lenf drenaj
Infrared
Pasif Jimnastik

OD 8108 insan biyonizması için üretilmiş yağ kırıcı, lenfatik drenaj, elektroterapi uygulaması yapan üçlü kombinasyon bir cihazdır. Zayıflama, selülit tedavisi, infrared, lenf drenaj, cilt gençleştirme gibi bakımlarda kullanılır. 10 elektrot bağlantısı, 10 lenf drenaj çıkışı ve 8 program infrared ayarı ile birçok tedavi yöntemi uygulanmasını sağlar.

S 170

Lenf drenaj

Xilia Press

Lenf drenaj



8 adet hazır programı vardır. Toplam 18 ayrı hava odacığından oluşmaktadır. Cihazda yer alan memory card sayesinde uygulamalar hafızaya alınarak kişiye özel hale getirilir.

Preso terapi bakımları için özel olarak geliştirilmiş bir cihazdır. Kıyafet dizaynı, lenf drenaj etkilerini en etkili olarak yapacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. 4 adet programı vardır. Her program 3 farklı sistemde ayarlanabilir.






IB 9116



Pasif Jimnastik (Elektrostimölasyon)

Selölit tedavisi, sıkılaştırma ve vücut şekillendirmede kullanılır. 10 çıkış ve 20 elektrot bağlantısı ile vücudun tüm bölgelerinde çalışma olanağı sağlar. Çalışma süresini ayarlayabilen dijital saat, her çıkışta hassas akım ayarı ve seçilen programa yönelik hassasiyet ayarı yapabilme özelliğine sahiptir. 8 programlı olup, otomatik ve manuel kullanılabilir. Hassas akım yoğunluğu ayarı müşterinizin rahat bir şekilde bakımı tamamlamasını sağlar.

IB 8116

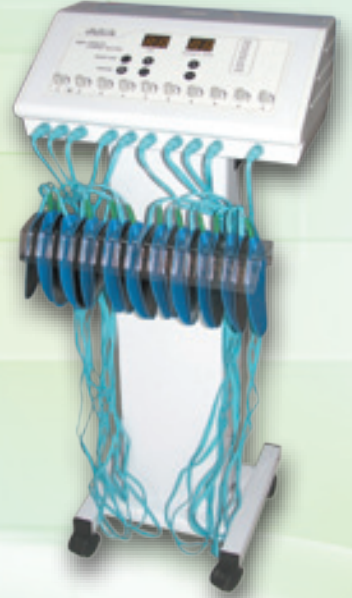

SL 1001

Pasif Jimnastik (Elektrostimölasyon)

Selölit tedavisi, lenf drenaj ve vücut şekillendirmede kullanılır. 10 çıkış ve 20 elektrot bağlantısı ile vücudun tüm bölgelerinde çalışma olanağı sağlar. Çalışma süresini ayarlayabilen dijital saat, her çıkışta hassas akım ayarı ve seçilen programa yönelik hassasiyet ayarı yapabilme özelliğine sahiptir.



S 179

Profesyonel Masaj Cihazı

Çok amaçlı kullanımı sayesinde profesyonel masaj için tercih edilir. Değişik başlıkları ile vücutta selülit ve yağ kırma masajı, rahatlama masajı, gerginleşmiş noktaları ve kas spazmlarını yatıştırma, ağrı tedavisi gibi bir çok bakımda kullanılır. Kan dolaşımını hızlandırır.



XG 5

Vibro Masaj Cihazı

XG 5 geliştirilmiş motor ve elektronik teknolojisi, alçak erişilebilir platformu, dijital egzersiz asistanı ve ön ayarlı egzersiz programlarıyla WBV alanında son noktadır.

XG5 size güç ve performansın yanı sıra daha pürüzsüz bir cilt, daha canlı bir bakış ve duruş kazandırır. Ayrıca WBV ile alınan sonuç hızlı olmakla beraber etkileri uzun dönemli olmaktadır. Egzersizler süresince vücuttaki hormonal aktivitede de artma meydana gelir. Buna bağlı olarak HGH (büyüme hormonu) oranı artarak yaraların ve ağrıların daha çabuk iyileşmesi sağlanırken, kortizol olarak da bilinen stres hormonunun oranı düşerek insanın kendisini daha iyi hissetmesi sağlanmış olur.

Teknik Özellikler

Gövde : Çelik
Maximum taşıma kapasitesi : 150 kg
Platform boyutları : 850 x 420 mm
Toplam yükseklik : 1400 mm
Platform yüksekliği : 165 mm

Toplam ağırlık : 73 kg
Frekans aralığı : 20-50 Hz
Titreşim aralığı : 1.8-3.9 mm
İvme : 8g
Motor : 500 Watt DC





Termoter Manuel

Isı Battaniyesi

Çamur, yosun ve parafin uygulamalarında kullanılan profesyonel ısı battaniyesi.

- 3 bölgede farklı ısı seçeneği
- 0-60 dakika zaman ayarı
- Manuel ısı ayarlama
- Opsiyonel ahşap stand



IB 8003

Dijital Isı Battaniyesi

- 3 bölgede farklı ısı seçeneği
- Çalışma süresi zaman ayarı
- Dijital ısı göstergesi
- 4 Farklı emniyet sistemi
- Özel dizayn ayaklı stand





4

Medikal Cihazları



Fractional CO2 RF Laser

Harika bir tedaviyi garantileyen özel lazer sistemi olarak tasarlanmıştır. CO2 lazer cilt gençleştirme sistemi olan, Nano Yag lazer enerji atışı, zamana yayılmayan kolay, hızlı, sabit ve güvenli bir tedavi sürecidir. Yüzde yara oluşturmada göz çevresi kırışıklıkları, güneş lekeleri, akne izlerini, doğum sonrasında oluşan izleri tedavi etmek amaçlı kullanılır. 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başlar. Bu tedaviden sonra cildinizin ferahladığını, bebeci bir görünüm kazandığını ve sağlıklı bir cilde kavuştuğunuzu fark edersiniz.

Teknik Özellikler

Lazer tipi : Carbon Dioxide Laser

Dalga boyu : 10600 nm

Radyofrekans sıklığı : 0,530 W

Ekran : 8,4 inch renkli dokunmatik ekran

Güç : 40W

Atış sıklığı : 33,3 Hz

Çalışma modu : Devamlı, tek atış, tekrardan atış ve süper atış

Tarama grafiği : Orta, dörtgen, yuvarlak, düz,

sıralı, üçgen, elips, altıgen

Çalışma şekli : Hiper atış modu

Atış enerjisi : Her bir nokta için 10mj-130mj arası seçim

Lazer aparatı : Doğrudan akımla dengelenen lazer aleti

Yoğunlaştırma odağı : f=100 mm

Işık Ölçüsü : 0.2 mm

Radyasyon zamanı : 1 ms

Ara verme : 1 ms

Soğutma : Su

Voltaj : 220 V - 50 Hz



Akne İzleri

Cilt Gençleştirme

Güneş Lekeleri

Yaşlılık Lekeleri

Yara İzi Tedavisi

Doğum Sonrası Lekeleri




Önce



Sonra



Önce

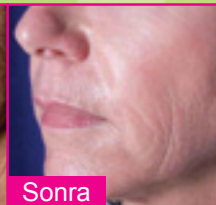

Sonra



Önce



Sonra



T808 Diode Lazer

Her Cilt Tipinde Kullanım

Uzun Kullanım Ömrü

Amerikan Diode Başlık

Sarf Malzemesi Yok


3.000.000 Atış

Teknik Özellikler

Dalga boyu	: 810 nm
Fluence	: 10-120 j/cm ²
Pulse süresi	: 10-1400 ms
Atış alanı	: 10x12 mm
Tekrarlama hızı	: 1-10 Hz
	: 1-3 Hz normal mode
	: 3-10 Hz LSHR mode
Soğutma	: Safir Contact
Operasyon	: Cilt Tipi (I-V)
Kullanım	: Dijital dokunmatik
Diode sistemi	: Made in USA
Sertifika	: Medikal CE
Ağırlık	: 80 Kg.

Lazer epilasyon için en uygun dalga boyu, hızlı ve kalıcı epilasyon. Sarf malzemesi kullanmadan contact soğutma ile ağrısız, etkili ve her cilt tipinde sorunsuz epilasyon. 120 j/cm² yüksek güç. Süper hızlı 1-10 hz tarama kapasitesi. Amerikadan ithal diode sistemi. Çift mode; normal diode lazer olarak ve LSHR hareketli tarama ile tamamen acısız kullanım.

Lazer Epilasyonda En Etkili Dalga Boyu

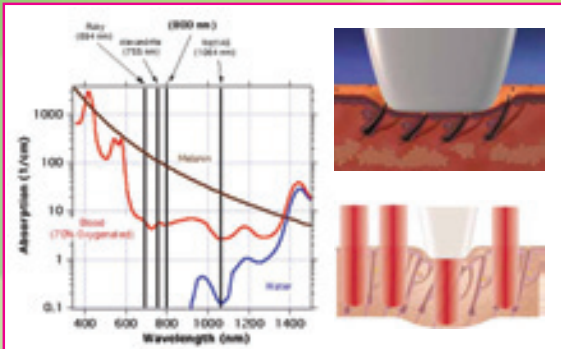

Önce



Sonra



Önce



Sonra



**Malezma ve
Dövme Silmede
Altın Standart**



Cosjet TR™

Qswitch Nd:Yag + KTP

Q-Switch Lazer teknolojisi başlı başına yeni tedavi yöntemlerini sizlere sunmaktadır. Standart olarak 1064 nm Nd:Yag lazer ve Q-Switch özelliğini, 532 nm KTP yi içinde barındıran Cosjet TR yüksek güç ve hızı size sunar. Tattoo (Dövme) silme, leke tedavisi ve güneş lekelerinin silinmesinde altın standart Cosjet TR dir. Free running mode özelliği ile ablatif olmayan cilt yenileme ve carbonsolusyonu ile cilt soyma (peeling) işlemleri yapabilen sistem daha birçok tedavide kullanılabilir. Cosjet TR ile yaz-kış uygulama yapabilirsiniz.

1064 nm ve 534 nm Q-Switch Lazer

1064 nm Q-Switch Nd:Yag lazer ile dermis de yer alan pigmentler nanosaniye hızındaki lazer ile hedeflenip parçalanır.

532 nm KTP dalga boyunun melanin tarafından absorpsiyonu yüksek olduğu için yüzeysel epidermal pigmente lezyonların silinmesinde kullanılır.

Free Running Mode ile Q-Switch devreden çıkartılır, bu mod ile ablatif olmayan cilt yenileme işlemi yapılır.

Laser Parameters

Laser medium	: Nd:Yag (Flashlamp-excited)
Wavelengths	: 532 nm; 1064 nm
Operating parameters	: Q-Switched, Frequency Doubled
Pulse Width	
Q-Switch	: 6 ns
'Free-running' mode	: 300 microseconds
Nominal delivered energy at end of articulated arm	
1064 nm	: 1.0 Joule
Free-running mode	: 1.3 Joule
Fluence (maximum)	
1064 nm	: 127.0 J/cm ² @ 1.0 mm spot size

532 nm

	: 32.0 J/cm ² @ 2.0 mm spot size
	: 14.0 J/cm ² @ 3.0 mm spot size
	: 8.0 J/cm ² @ 4.0 mm spot size
	: 5.0 J/cm ² @ 5.0 mm spot size
	: 3.5 J/cm ² @ 6.0 mm spot size
	: 63.7 J/cm ² @ 1.0 mm spot size
	: 16.0 J/cm ² @ 2.0 mm spot size
	: 7.0 J/cm ² @ 3.0 mm spot size
	: 4.0 J/cm ² @ 4.0 mm spot size
	: 2.5 J/cm ² @ 5.0 mm spot size
	: 1.8 J/cm ² @ 6.0 mm spot size

Treatment repetition rate : Single Shot, 1 to 10 Hertz

Spot sizes	: 1 to 6 mm
Optical delivery	: Articulated arm
Aiming beam	: Laser diode 655 nm
Cooling	: Closed cycle water
Input Power	: 220 V, 50Hz



Lipotherme Lazer Lipoliz

Adipocytolysis Laser

Etkisi ve güvenilirliği kanıtlanmış lazer lipoliz sistemi
Yağ dokusu hızlı sıcaklık artışı ile sıvılaşır
Adipos hücrelerin zarı denature olur
ve yağ ortaya çıkar
Trigliseritler parçalanır.

Avantajları

- Yağ deposunun parçalanmasını sağlar
- Vücut şekillendirme için gerçek çözümler üretir
- Güvenilir bir teknolojiye sahiptir
- Ölçülebilir ve tekrarlanabilir sonuçlar verir
- Müşteri için konforludur

Klinik Sonuçlar

- Uygulama bölgesinde önemli azalma
- 3 ay sonrasında yağ miktarında %17 ile %25 arasında azalma
- Portakal kabuğu görünümü düzeltme
- İşlem sonrası 6 aya kadar sürekli artan sonuçlar

Teknik Özellikler

Lazer	: Diode laser
Dalga boyu	: 980 nm
Güç	: 25 W
Emme modu	: Devamlı
Lazer sınıfı	: Class 4
Boyutlar	: H:45cm x L:45cm x I:35cm
Ağırlık	: 15 kg
Platform	: Çoklu uygulamalar
	: Lipolysis
	: Vascular
	: Endovenous




Sadece 1 Tek Seans
Güvenli ve Hassas
Lokal Anestezi
Kesi Yok
Kolay Kullanım

Kullanım Alanları

- Yüz ve yanaklar
- Yüz çevresi
- Dizler
- Sırt ve göbek
- Kollar ve bacak içleri
- Basen



Çevre dokuya ısı yayılması minimumda
Adiposit dokunun zarının parçalanması için 65 derece ısı başlık ucunda oluşur ve çevreye yayılmaz. Sistem peltier sistem ile özel olarak soğutulur. Uygulama kanulu ısınması minimize edilmiştir.

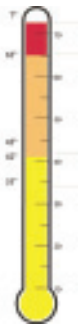



IB 8000

Özel vakum başlıkları ile masaj (selülit tedavisi, lenf drenaj, sıkılaştırma), yüz ve göğüs bakımı, derinlemesine peeling ile cilt yenileme, kırışıklık, sivilce izleri, güneş ve doğum lekeleri, yara ve yanık izleri, vücut çatlakları tedavisi için hazırlanmış bir cihazdır.

Teknik Özellikler

Voltaj	: AC110v~220V 50Hz~60Hz
Kablo Uzunluğu	: 1.8m
Sertifika	: CE
Frekans	: 250W
Ağırlık	: 22Kg
Boyutlar	: 94 x 48 x 45 cm



US-09 Dövme Silme Makinası

Dünyanın en gelişmiş sistemlerini kullanarak göz üstü, kaş, dudak ve vücudun diğer bölgelerindeki siyah, mavi, kahverengi ve kırmızı dövme pigmentlerini çıkarır. Yaşlanma, güneş, doğum lekeleri ve pigment değişimlerini ortadan kaldırır.

Teknik Özellikler

Dalga boyu	: 1064nm / 532nm
Lazer tipi	: Sapphire+ruby switch Q, KTP/YAG laser
Atış enerjisi	: 1800 mj
Atış genişliği	: 6 ns
Frekans	: 1-6 Hz
Atış çapı	: 1-8 mm
Soğutma	: Hava ve Su
Boyutlar	: 54 x 39 x 122 cm
Voltaj	: 220V 50Hz



5

Ekipmanlar

CBK - 4M 4 Motorlu Koltuk



4 motorlu cilt bakım koltuğu cilt bakımı, göz operasyonu, kan alma, saç ekimi ve ufak cerrahi operasyonlar için tasarlanmıştır.

Koltuk, sırt, oturak ve ayak olmak üzere 3 temel parçadan oluşmaktadır. Sırt , ayak , trendelenburg ve aşağı-yukarı yükseklik ayarı 4 adet DC motor ve elektronik el kumandası ile yapılmakta ve istenilen pozisyon sağlanabilmektedir. Yukarı & aşağı yükseklik ayarı özel bir yataklama sistemi sayesinde dikey olarak yapılmakta, bu yüzden de koltuk yükselirken herhangi bir pozisyon değişikliği olmamaktadır.

Özel vinleks malzemeyle kaplanmış olan döşeme uzun ömürlü, kolay temizlenebilir, su geçirmez ve antibakteriyel özelliktedir. Çelik konstrüksiyon galvaniz kaplama ve elektrostatik toz boya ile korozyona karşı korumaya alınmış ve tamamı antibakteriyel özelliğe sahip kolay temizlenebilir ABS plastiklerle kapatılmıştır. Böylece çok şık bir görünüme ve sağlamlığa sahiptir. Kollar sırt hareketinde sırtla birlikte yerden paralelliği bozulmadan hareket eder, ayrıca isteğe bağlı olarak kolaylıkla sökülüp takılabilir. Koltuğun ayak bölümünde sökülüp takılabilir ayak uzatması mevcuttur.

Koltuğun başlık bölümü yüksekliği hastanın pozisyonuna ayarlanabilir ve istenildiği zaman sökülüp takılabilir yapıdadır.

Yükseklik	: 65cm-90cm
En	: 57 cm
Kolçaklı en	: 81 cm
Boy	: 173cm+20cm
Sırt uzunluk	: 60 cm
Oturak uzunluk	: 50 cm
Ayak uzunluk	: 35 cm
Ayak uzatması	: 15 cm
Sırt hareketi	: 0-80°
Ayak hareketi	: 0-85°
Trendelenburg	: 0-22°

CBK - 3H Hidrolik 3 Pedallı Koltuk



CBK 3H cilt bakım koltuğu cilt bakımı, göz operasyonu, kan alma, saç ekimi ve ufak cerrahi operasyonlar için tasarlanmıştır. Koltuk sırt, oturak ve ayak olmak üzere 3 temel parçadan oluşmaktadır. Özel vinleks malzemeyle kaplanmış olan döşeme uzun ömürlü, kolay temizlenebilir, su geçirmez ve antibakteriyel özelliktedir. Çelik konstrüksiyon galvaniz kaplama ve elektrostatik toz boya ile korozyona karşı korumaya alınmış ve tamamı antibakteriyel özelliğe sahip kolay temizlenebilir ABS plastiklerle kapatılmıştır. Böylece çok şık bir görünüme ve sağlamlığa sahiptir. Arka kısımdaki ayak pedalları ile pozisyon ayarı yapılması sağlanır. Sistem hidrolik olarak çalışmaktadır.

CBK - H01

Cilt Bakım Koltuğu

- Ayarlanabilir sırt ve ayak kısmı
 - Koltuk altında özel ikili raf
- Baş minderini çıkararak, masaj koltuğu şeklinde kullanma imkanı
- Sedye pozisyonuna geçme özelliği
 - Suni deri döşeme
 - Geniş ve rahat minder



CBK - K02

Cilt Bakım Koltuğu

- Mekanik , ayarlanabilir sırt ve ayak kısmı
 - Pozisyon ayarlı
 - Suni deri döşeme
 - Elektrostatik boya
- Sedye pozisyonunda kullanabilme özelliği





AS-03 Ahşap Sedye

- 180 x 60 x 70 cm
- Dört kademe ayarlı başlık kısmı
- İki çekmece bölümü
- Suni deri döşeme



AS-04 Ahşap Masaj Sedyesi

- 180 x 60 x 70 cm
- Yüz kısmı masaj delikli
- İki çekmece bölümü
- Suni deri döşeme



KS-05 Sedye

- Metal aksam profil
- Elektrostatik toz boya
- Masa üzerinde 3 cm kalınlığında sünger üzerine suni deri ile kaplama
- Sırt kısmı ayarlanabilir

MM-06

Manikür Masası

- Açılır - kapanabilir
- Çekmeceli
- Tekerlekli
- Ahşap, dekoratif



MA-07

Manikür Arabası

- Ahşap
- Manikür kolu ayarlanabilir
- Çekmeceli
- Tekerlekli



UK-08**Uzman Koltuğu
(Arkalıksız)**

- Hidrolik
- Arkalıksız
- Tekerlekli

**UK-09****Uzman Koltuğu
(Arkalıklı)**

- Hidrolik
- Arkalıklı
- Tekerlekli

**PL-10****Pedikür Leğeni**

- Jakuzili
- Masajlı

**AS-11****Ağda Standı**

- Ahşap
- Özel raf sistemi
- Çöp kutusu
- Tekerlekli

**US-12****Ürün Sehpası**

- Ahşap
- Çekmeceli
- Üç raflı
- Tekerlekli





Kuru Hava Steril

- 0 - 300 derece ısı ayarlı
- Zaman ayarlı
- Termostatlı
- 16 lt kapasiteli

Ölçüler
Yükseklik
Genişlik
Derinlik

Dış : 350 mm
İç : 250 mm
300 mm
225 mm

İç : 250 mm
300 mm
225 mm



Kuru Hava Steril (Dijital)

- Dijital
- 3 ısı programlı
- Otomatik kapanma



Havlu Isıtıcı

Hijyen ve konforun sürekliliğini sağlayan bir cihazdır. Cihazın kendine özel ısıtma özelliği ile havlularınızda hijyeni sağlar. Isıttığınız havlularla kompres yapabilir. Kozmetik temizleme işlemini daha keyifli bir hale dönüştürebilirsiniz.

Uv Steril

UV ışınları ile bakımda kullanılan malzemeleri sterilize eder. Güvenlik nedeniyle çalışır durumdayken kapağı açıldığında çalışmasını otomatik olarak durdurur.

Güç : 8 Watt
Sterilizasyon süresi : 20 dakika
İç Ebatları : 373 x 220 x 100 mm



Ayaklı Büyüteç (Loop)

- 22 watt simit lamba
- Büyüteç
- Ayarlanabilir akrobat
- Tekerlekli ayak



LTS 2010

Manikür - Pedikür Spa

- 8 programlı kumandalı masaj sistemi
 - Pinomatik açma-kapama
 - Koltuk renk seçeneği
 - Antiseptik malzeme
 - Manikür kolları
 - 6 adet jet



LTS 1001

Manikür - Pedikür Spa

- 8 programlı koltuk masajı
 - Koltuk renk seçenekleri
 - 8 midi jet
 - 4 blower
 - Antiseptik malzeme
 - Manikür kolları
 - Küvet içi renk terapi





W-15 3+1 Kombine Isıtıcı

3 Adet 100 ml kartuş ağdayı, 800 gr konserve ve sir ağdayı aynı anda ısıtılabilir. İki farklı bölümü ayrı ısıtmanın yanı sıra termostat sistemi ile ısı kontrolünü sağlar.

IH 802 Konserve Isıtıcı

800 gr Konserve ve sir ağda ısıtıcısı
Termostat ayarlı



W 03 Parafin Isıtıcı

3 kg parafin kapasiteli manuel ısı ayarlı
Termostat sistemli ısı kontrollü



IH 701 Parafin Isıtıcı

Dijital Isı Göstergeli + 3 Kg. Parafin Kapasiteli
Termostat sistemli ısı kontrollü



Tekli Kartuş Isıtıcı Set

Sir Ağda Isıtıcı - 2 Adet Kartuş Ağda
Ağda Yağı ve Ağda Kağıdı



Üçlü Kartuş Isıtıcı Set

100 MI Kartuş Ağda Isıtıcı
Termostat sistemli ısı kontrollü



Beşli Kartuş Isıtıcı Set

100 MI Kartuş Ağda Isıtıcı
Termostat sistemli ısı kontrollü





6

Sarf Malzemeleri



SARF MALZEMELERİ



Nira 100 MI Kartuş
Ağda (Azulen)



Nira 100 MI Kartuş
Ağda (Naturel)



Kalıp Ağda
(Naturel - Azulen)



Ağda Cihazı
Temizleyicisi



Tüy geciktirici Ampul
10x10 ml.



Spatula



100 Mt. Rulo
Ağda Kağıdı



Ağda Temizleme Yağı



Ağda Sonrası
Sakinleştirici Köpük

PROXILYT AYAK BAKIM SOLÜSYONU : Gün boyu ayakkabı içinde vücudun ağırlığını taşıyan, olumsuz iklim koşullarından etkilenen ayakların bakım ve sağlığı için hazırlanmış bir solüsyondur. Ayak ve tırnakta bakteri, küf ve maya mantar enfeksiyonlarına karşı geniş spektrumlu etkiye sahiptir.

PROXILYT DIŞ GENİTAL BÖLGE YIKAMA SOLÜSYONU : Dış genital bölgenin hijyeni ve sağlığını korumak için hazırlanmış bir solüsyondur. Kadın ve Erkeklerde genital bölgede oluşan bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Bu enfeksiyonlardan dolayı hassas alanlarda oluşan kötü koku, kızarıklık ve kaşıntıları giderir.

PROXILYT YÜZ TEMİZLEME SOLÜSYONU : Her yaştaki kadın ve erkeğin yüz temizlik ve bakımında kullanabileceği şekilde hazırlanmış bir solüsyondur. Yüzdeki her türlü mikrobik kaynaklı sivilce, aft ve akneleri giderir. Yüzde oluşan sivilce lekeleri, siyah nokta, iz ve kırışıklıkları giderir. Bakteri ve mantar enfeksiyonlarının oluşumunu önler, oluşmuş iyonları iyileştirir. Cildin derinlemesine temizlenmesini sağlar.

PROXILYT VÜCUT BAKIM SOLÜSYONU : Vücut el ve yüz temizliği ve bakımında kullanılan bir solüsyondur. Cilde zarar veren bakteri, virüs ve her türlü mantar enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Vücut, el, yüz, kasık, perine bölgesi, koltuk ve göğüs altında oluşan kızarıklık ve terlemeden dolayı meydana gelen kötü koku ve kaşıntıları giderir.





Havlu Çorap



Havlu Eldiven



El - Ayak Parafinleri



Dezenfektan



Redu Gel
Vücut Sıkılaştırıcı Jel



Selu Gel
Selülit Giderici Jel



Magic Argile
Vücuttaki selülitlerin dışarı atılmasını kolaylaştıran yosun, kil ve mineral karışımı doğal bir bileşimdir.
Kan dolaşımını hızlandırır, terleme yoluyla toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.



Dr Page El ve Vücut peelingi
vücuttaki ölü derinin atılmasını sağlar kan dolaşımını hızlandırır yumuşak bir cilt dokusu yaratır.



Masaj Yağı
Portakal - Frutti



Vücut Naylonu
(Yosun ve parafin Uygulamaları için)



Lazer ve IPL Epilasyon
Sonrası Güneş Korumucu ve
Sakinleştirici Krem



Kolajen Krem



Aseton



Alkol

SARF MALZEMELERİ



Ekme Kirpik Ürünleri
Kirpik + Yapıştırıcı + Sökücü



Cımbız



Kaş - Kirpik Boyası ve
Malzemeleri



Komedon
Tel ve Kaşık



Epilasyon İğnesi
İzoleli - Altın



Latex Eldiven



Cilt Bakım Sünger



Maske Fırçası



Manikür-Pedikür Tozu



Manikür Galoşu



Sedye Örtüsü



Tek Kullanımlık Havlu



Ağız Maskesi



Saç Bonesi



Pedikür Galoşu



Pedikür Terliği

NİRA KOLAJEN YÜZ MASKESİ

BEBEK CİLDİNE “İNCİ” İLE ULAŞIN...

Maske içerisindeki maddeler hızla cildin derinlemesine işler, hücresel hareketi başlatır ve yeni hücre oluşumunu sağlar. Metabolizmayı hızlandırması sonucu yeterli nemlendirmeyi ve cildin beslenmesini sağlarken, pürüzsüz görünüm için cildin derinliklerine çökmüş olan melanini kompoze eder. Ürün aynı zamanda cilt nemini ve elastikiyetini arttırarak, gerekli kolajen, elastini cilde verir. Beyaz, taze ve bebek cildi yumuşaklığında bir cilt yaratır.

Yüzünüzü temizledikten sonra maskeyi ambalajından çıkarıp uygun bir şekilde yüzünüze yerleştiriniz. 20 dakika bekledikten sonra çıkartınız. Cilt yüzeyindeki nemle birlikte hafif masaj yaparak cildinizi dinlendiriniz. Uygulama sonrası cildin temizlenmesi gerekli değildir. Tavsiye edilen bakım minimum beş uygulamadır. Haftada iki bakım bebek cildine ulaşmanız için yeterli olacaktır. Maskenin yumuşaklık ve nem etkisini birkaç gün hissedebilirsiniz.



NİRA GÖZ ALTI MASKESİ

Göz Altı bakımında Mükemmel Sonuç...

Kırılganlık, torbalanma ve morluklarda...

Kolajen Göz Altı Maskesi

İçindekiler:

Kolajen, B3 Vitamini, E vitamini, A vitamini, C vitamini, AloeVera, Papatya Ekstresi, Papunya Ekstresi, Altın Elementi.

Kullanım Talimatları:

Maskeyi poşet içinden çıkarttıktan sonra temizlenmiş olan gözaltı bölgesine yerleştirin. 15-20 dakika uygulama süresi sonunda çıkartın. Bölgeye birkaç dakika yumuşak masaj yapın.





KULAK TEMİZLEYİCİSİ

NİRA EAR CLEAN - Kulak Temizleyici

Nira Ear Clean Nedir?

Bal mumu, parafin ve koton karışımından yapılmış bir tür aromaterapi kulak temizleyicisi.

Terosi Nedir?

Kızılderililer ve Asya kültüründe 2 bin yıldır kullanılan bu çeşit kulak temizleyici günümüzde de aromaterapi yöntemi olarak yer almaktadır. Tanımlanmasında etkinin daha çok fiziksel temizliğin verdiği ruhsal rahatlıktan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Kulak içerisine yerleştirilen temizleyicinin yanma esnasında oluşturduğu sıcak havanın verdiği fiziksel rahatlık ve birikmiş olan maddelerin çözülmesinden dolayı gelen rahatlık işlevliğin belirtileridir.

Yanma esnasında hafif basınç hava akımı oluşur. Kulak içerisinde oluşan bu ılık hava akımı masaj etkisi yaratır. Bu etki ile beraber kulak içerisindeki birikimler ("kir") çözülmeye başlar. Oluşan vakum kulak içindeki bu birikimleri dışarıya doğru taşınmasını sağlar ve bir rahatlama oluşur.





SUN SPEED TURBO POWER SYSTEM

Sun Speed dikey solaryum cihazları cilde hoş duygular sağlayan etkili ve koruyucu bronzlaşma sağlar. Cildinize çekici ve sağlıklı bir görüntü verir.

- Turbo Havalandırma
- Merkezi Müzik Sistemi
- Yüz - Vücut Havalandırma
- Jeton Sistemi
- Aromaterapi

UV - Lamp : 2.0%
 Boyutlar : 170 x 130 x 230 cm
 Ağırlık : 450 Kg.
 Kabin Odası : 200 x 200 x 250
 Alm. - İng. - Tr dijital kontrol ünitesi

Kapasite Seçenekleri

51 x 180 W	Güç: 9180W 3x25A
51 x 200 W	Güç: 10200W 3x32A
60 x 180 W	Güç: 10800W 3x32A
60 x 200 W	Güç: 12000W 3x32A

Belirtilen Toplam Güç;
 Solaryum makinelerinin yakma gücüdür.
 Havalandırmalar bu güce dahil değildir.





Basınevleri Selçuklu Cad. No: 161/A Keçiören - ANKARA
Tel: 0312 321 86 19 - 321 65 19 Fax: 0312 321 63 77
info@ultrakoz.com - www.lotuskozmetik.com
www.utrakozmetik.com